

使用說明

- 1 簡介
- 2 儲存
- 3 清潔和消毒
- 4 滅菌
- 5 使用
- 6 處置

1 簡介

必須嚴格遵守這些使用說明和安全建議。否則可能會增加受傷的風險，並損害設備的正常功能。這些設備僅供牙科使用。

儀器出售時尚未消毒，因此**每次**使用前應清洗、消毒和滅菌。

這些儀器具有多種用途，因此可以重複使用。但是，使用這些儀器的醫生應全權負責根據各自的情況以及產品的潛在磨損情況，決定是否可以重複使用這些產品以及使用的頻率。

2 儲存

第一次使用前，設備應使用原始包裝，在室溫、無塵、防潮的條件下存放。這有助於延續設備的使用壽命。作為可重複使用的儀器，其使用壽命取決於其磨損情況。

滅菌後，設備需要保存在乾燥無塵的滅菌包裝中。請注意，設備滅菌狀態的保質期取決於滅菌包裝的有效性。在規定日期到期後，設備需要重新滅菌。

3 清潔和消毒

警告：

切勿使用酒精或溶劑進行清潔。

切勿在超聲波清洗器中與其他儀器一起清潔 CSTT。

如有可能，應該使用自動化程式（WD（清洗消毒器））對儀器進行清洗和消毒。只有在自動化程式不可用的情況下，才應使用手動程式（即使在應用超聲波清洗器的情況下）；在這種情況下，必須考慮手動程式的效率以及可重複性低下的情況。

選擇合適的清潔和消毒劑時，**您需要確保**

- 基本適合用於對由金屬/氧化鋯材料製成的儀器進行清潔和消毒
- 清潔劑適合用於超聲波清洗（無泡沫產生）
- 使用與所使用的清潔劑相容的、具有認可效率（例如 VAH/DGHM 或 FDA/EPA 許可或 CE 標誌）的消毒劑。
- 避免腐蝕性產品（鹽酸、過氧化氫.....），否則可能會腐蝕儀器。

手動清潔和消毒程式：

立即將使用過的儀器放入特殊的防腐消毒浴槽中短時間消毒。

在超聲波清洗器中或自來水下清洗儀器（不要與其他儀器一起）。

在流水下沖洗儀器至少 1 分鐘（溫度 < 35°C/95°F）。

請僅使用新鮮配製的溶液以及無菌或微污染水（最多 10 個細菌/毫升）以及低內毒素污染水（最多 0.25 內毒素單位/毫升），例如純化水/高度純化水，並使用柔軟、潔淨、不起毛的布和/或過濾空氣用於乾燥。

自動清潔/消毒（消毒器/WD（清洗消毒器））：

在選擇 WD 時，請考慮以下幾點：


- WD 達到基本認可效率（例如，根據 DGHM 或 ISO 15883 的 CE 標誌或 FDA 許可）
- 可提供認可的熱消毒程式（A0 值 ≥ 3000 ，對於舊器械，則在 90°C/194°F 下消毒至少 5 分鐘；在化學消毒的情況下，器械上可能殘留消毒劑）
- 程式基本適用於儀器以及程式中具有足夠的沖洗步驟
- 僅使用無菌或低污染水進行後沖洗（最多 10 個細菌/毫升，最多 0.25 內毒素單位/毫升），例如純化水/高度純化水 - 僅使用過濾空氣（無油、微生物和顆粒污染低）進行乾燥
- 定期維護和檢查/校準 WD

4 滅菌

滅菌前，將儀器放在適合滅菌的支架和託盤中。

對儀器滅菌。高壓釜：18 分鐘，134°C，2 bars

5 使用

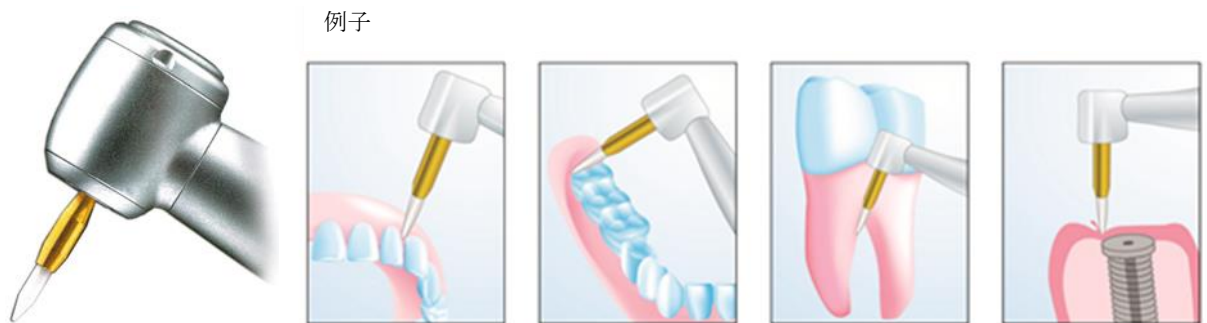

警告：

無需任何水/噴霧冷卻即可使用。

CSTT（陶瓷軟組織修剪器）在空氣渦輪 (300'000 – 500'000 min⁻¹) 中旋轉時使用。正確使用動能會產生熱凝固效果，而不會灼傷組織。切勿在低於推薦速度時使用，較低的速度可能會造成傷害，必須避免。使用 CSTT 時，避免過度接觸牙齒或骨組織。

應用

1. CSTT 用作軟組織修剪器

- 牙齦建模
- 牙根間肉芽組織撕裂傷
- 去除牙齦增生/乳頭切除術
- 骨內植入部分和滯留牙齒的暴露

在使用 CSTT 之前，必須沖洗掉所有血液和膿汁，並用海綿或空氣注射器擦乾傷口。CSTT 的尖端必須以 30 - 45 度的輕柔刷動動作穿過組織，不要壓迫修剪器的尖端刺入組織或僅一次切割就切割過深。

2. 補充應用：齦溝打開

CSTT 在齦溝內以必要深度的緩慢滑動運動。為避免任何組織損失，保護邊緣牙齦的上皮非常重要。

在所有應用中正確使用 CSTT，您會發現 CSTT 不僅可以替代電刀和手術刀，而且在許多情況下還可以替代排齦綫的使用。

6 處置

按照國家和地方法律法規進行處置。